

OV

Ovulační test moči Life Light

Kat. č.: LF-LS (2,5 mm–6,0 mm)

Jednostupňový ovulační test moči Life Light je kvalitativní test používaný k předpovědi, kdy nastává zvýšení LH a kdy budete mít tedy pravděpodobně ovulaci. Pouze pro použití k provedení testu in vitro u sama sebe. Pouze k vnějšímu použití.

JAK TEST FUNGUJE?

Hladina LH (luteinizační hormon), který je za normálních okolností v moči žen přítomen, se uprostřed menstruačního cyklu výrazně zvýší. Zvýšení LH spustí ovulaci, což je doba, kdy se obvykle u plodných žen pravidelně uvolní vajíčko. Odborníci z WHO (Světová zdravotnická organizace) tvrdí, že testování LH je spolehlivý způsob zjištění ovulace. Ovulace nastane 24–48 hodin po pozitivním výsledku testu. Při ponoření proužku do vzorku moči prochází vzorek díky kapilárnímu působení membránou. Jakmile LH ve vzorku dosáhne oblasti testovací zóny membrány, vytvoří barevnou čárku. Nepřítomnost této barevné čárky znamená negativní výsledek. Pokud by test proveden správně, objeví se v oblasti kontrolní zóny barevná čárka, která slouží jako kontrola správného postupu. Testovací proužek zjistí ovulaci s vysokým stupněm jistoty. Je to cenný nástroj pomáhající otěhotnění, protože určuje období, kdy se buňky vajíčka a spermie setkají za nejlepších podmínek. Ovulace může být nepravidelná z důvodů různých okolností, emocí a dalších faktorů v životě. Nemůžete předpokládat, že ovulace nastane vždy ve stejnou dobu po menstruaci. Proto musíte test v každém menstruačním cyklu provádět znovu.

OBSAH TESTOVACÍ SADY

- Dva sáčky obsahující proužek a vysoušecí prostředek. Vysoušecí prostředek slouží pouze ke skladovacím účelům a při testování se nepoužívá.
- Leták s pokyny k použití.

CO JEŠTĚ POTŘEBUJETE?

- Čistou suchou plastovou nebo skleněnou nádobku na odběr moči.
- Měřič času (hodinky nebo hodiny).

ODBĚR VZORKŮ A PŘÍPRAVA

KDY ODEBRAT VZOREK MOČI PRO TESTOVÁNÍ?

Pro provedení ovulačního testu se hodí jakýkoli vzorek moči.

JAK ODEBRAT MOČ?


Vzorky moči lze odebírat do jakékoli čisté suché plastové nebo skleněné nádobky.

KDY ZAČÍT TESTOVAT

Délka menstruačního cyklu je doba od prvního dne menstruačního krvácení do dne před začátkem následujícího krvácení. Před testováním si zjistěte délku menstruačního cyklu. V níže uvedeně tabulce si zjistěte, kdy máte začít testovat. Pokud je váš menstruační cyklus kratší než 21 dní nebo delší než 38 dní, poraďte se se svým lékařem. Pokud neznáte délku svého menstruačního cyklu, můžete začít testovat 11 dní po své první menstruaci, protože průměrná délka menstruačního cyklu je 28 dní. Provádějte každý den jeden test po dobu 5 dní, nebo dokud nezjistíte zvýšení hladiny LH.

Příklad kalendáře

Délka cyklu	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Den cyklu	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24


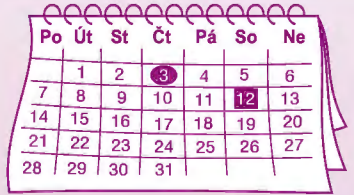


Příklad: Pokud váš normální menstruační cyklus trvá 26 dní, uvádí tabulka, že testování má začít 10. den. Následující kalendář uvádí, jak určit 10. den.

- 3+ = první den menstruačního krvácení
- 12# = den, kdy začít testovat (10. den)

JAK PROVÁDĚT TEST?

- Testovací proužek i moč musejí být před testováním v pokojové teplotě (15–30 °C).
- Vyjměte z neporušeného obalu testovací proužek.
- Ponořte proužek do moči špičkou směrem k moči. Po 3 sekundách proužek vyjměte a položte ho vodorovně na čistý suchý nesavý povrch (například na hrlo nádobky s močí).
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dbejte, aby hladina moči nepřesáhla úroveň MAX (rysa značky), jinak test nebude fungovat správně.
- Za 5 minut odečtete výsledky. Neodečítejte výsledky po více než 5 minutách.

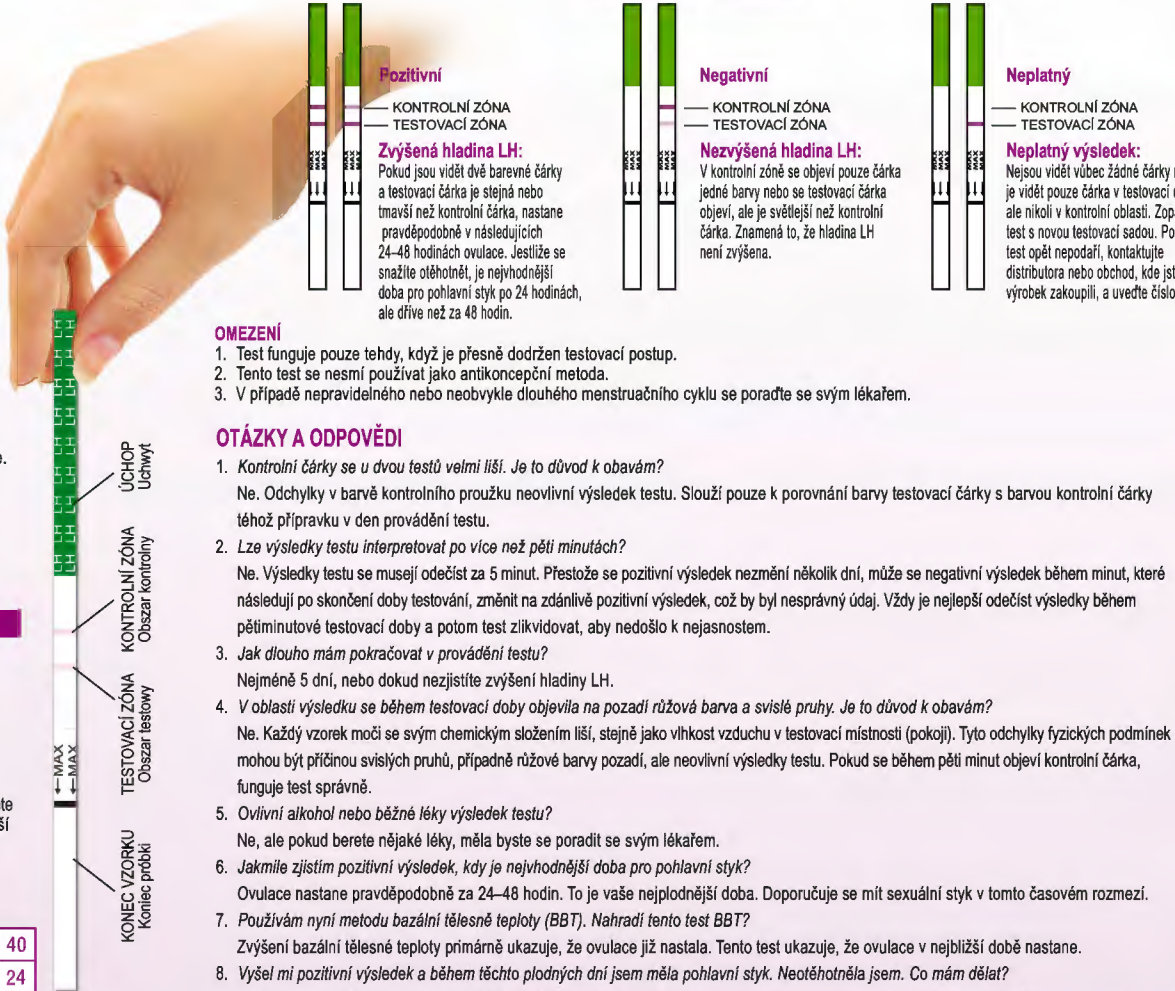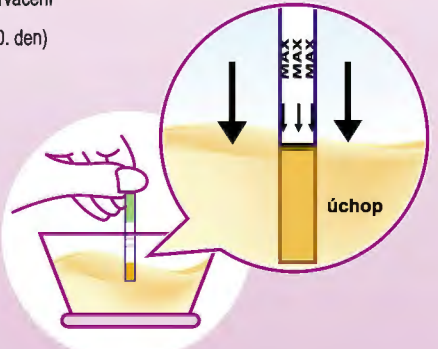

OMEZENÍ

- Test funguje pouze tehdy, když je přesně dodržen testovací postup.
- Tento test se nesmí používat jako antikoncepční metoda.
- V případě nepravidelného nebo neobvykle dlouhého menstruačního cyklu se poraďte se svým lékařem.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

- Kontrolní čárky se u dvou testů velmi liší. Je to důvod k obavám?**
Ne. Odchytky v barvě kontrolního proužku neovlivní výsledek testu. Slouží pouze k porovnání barvy testovací čárky s barvou kontrolní čárky téhož přípravku v den provádění testu.
- Lze výsledky testu interpretovat po více než pěti minutách?**
Ne. Výsledky testu se musejí odečíst za 5 minut. Přestože se pozitivní výsledek nezmění několik dní, může se negativní výsledek během minut, které následují po skončení doby testování, změnit na zdánlivě pozitivní výsledek, což by byl nesprávný údaj. Vždy je nejlepší odečíst výsledky během pětiminutové testovací doby a potom test zlikvidovat, aby nedošlo k nejasnostem.
- Jak dlouho mám pokračovat v provádění testu?**
Nejméně 5 dní, nebo dokud nezjistíte zvýšení hladiny LH.
- V oblasti výsledku se během testovací doby objevila na pozadí růžová barva a vislé pruhy. Je to důvod k obavám?**
Ne. Každý vzorek moči se svým chemickým složením liší, stejně jako vlhkost vzduchu v testovací místnosti (pokojí). Tyto odchytky fyzických podmínek mohou být příčinou svislých pruhů, případně růžové barvy pozadí, ale neovlivní výsledky testu. Pokud se během pěti minut objeví kontrolní čárka, funguje test správně.
- Ovlivní alkohol nebo běžné léky výsledek testu?**
Ne, ale pokud berete nějaké léky, měla byste se poradit se svým lékařem.
- Jakmile zjistím pozitivní výsledek, kdy je nejvhodnější doba pro pohlavní styk?**
Ovulace nastane pravděpodobně za 24–48 hodin. To je vaše nejpłodnější doba. Doporučuje se mít sexuální styk v tomto časovém rozmezí.
- Používám nyní metodu bazální tělesné teploty (BBT). Nahradí tento test BBT?**
Zvýšení bazální tělesné teploty přímárně ukazuje, že ovulace již nastala. Tento test ukazuje, že ovulace v nejbližší době nastane.
- Vyšel mi pozitivní výsledek a během těchto plodných dní jsem měla pohlavní styk. Neotěhotněla jsem. Co mám dělat?**
Vaši schopnost otěhotnět ovlivňuje mnoho faktorů. Často může být nutné používat testovací sadu 3–4 měsíce. Pokud neotěhotníte po 3–4 měsících, měla byste se vy i váš partner poradit s lékařem.
- Bude výsledek ovlivněn množstvím tekutin, které vypiju?**
Doporučujeme, abyste asi na dvě hodiny před odběrem moči omezila příjem tekutin, protože vysoký příjem tekutin před testováním zředí hormon v moči.

VÝZNAM SYMBOLŮ NA OBALU

	Pozor! Čtěte pečlivě návod k použití! Pozor! Čtěte pozorně návod na použití! Uwaga! Przeczytaj instrukcję!		Počet testů v balení Počet testů v balení Liczba testów		skladujte na suchém a chladném místě, chráňte před sluncem składuj na suchym a chłodnym miejscu, chronić przed słońcem przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chronić od słońca
	Pouze k použití in vitro Ibe na použití in vitro Diagnostyki in vitro		Spotřebujte do Spotřebujte do Używać tylko raz		Nepoužívejte opakovaně, Nepoužívejte opakovaně Używać tylko raz
	Skladujte mezi 4 °C a 30 °C Skladuj między 4 °C a 30 °C Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C		Číslo šarže Číslo šarže Numer Lot		Evropský zástupce, Europejský zástupce Przedstawiciel Europejskiego
					Výrobce, Výrobca, Fabrykant.

Core Technology Co., Ltd., R. 100, Bldg. C, No.29
Life Park Rd., Changping Distr., Beijing, China

EC REP Zástupce v ES Wellkang Ltd. t/a Wellkang Tech Consult
Suite B, 29 Harley Str., London W1G 9QR England, UK



Vertrieb-Distribution-Distribuzione: Cedom AG
CH-3001 Bern Switzerland, www.cedom.biz

PL

Ovulation – test owulacyjny

z moczu Nr kat. LF-LS (2,5 mm-6,0 mm)

Jednoetapowy test owulacyjny z moczu Life-Light Ovulation jest jakościowym testem wykorzystywanym do przewidywania przedowulacyjnego wyrzutu LH i tym samym przewidywania czasu prawdopodobnej owulacji. Wyłącznie do samodzielnego przeprowadzenia badania in vitro. Wyłącznie do zastosowania zewnętrznego.

JAK DZIAŁA TEN TEST?

Stężenie LH (hormonu luteinizującego), który jest obecny w moczu zdrowych kobiet, znacząco wzrósł w połowie cyklu wložiť: Organizacji Wzrost stężenia LH wyzwała owulację, która wariogodnym u zdrowych, plodnych kobiet, gdy okresowo uwalniane jest jajeczko. Eksperci Światowej Zdrowia (WHO) uznali, że badanie stężenia LH jest wiarygodnym sposobem wykrywania owulacji. Owulacja wystąpi 24-48 godzin po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu. Po zanurzeniu paska w próbce moczu włoskowość sprawia, że próbka przemieszcza się wzdłuż błony. Gdy hormon LH zawarty w próbce dotrze do obszaru testowego, tworzy kolorową linię. Brak tej kolorowej linii świadczy o wyniku negatywnym. Jeśli test został wykonany poprawnie, kolorowa linia pojawi się także w obszarze kontrolnym. Jest to kontrola działania testu. Pasek testowy wykrywa owulację z dużym stopniem pewności. Jest cennym narzędziem wspomagającym zacięcie w ciąży ponieważ określa czas, kiedy jajeczko i plemniki spotkają się w najlepszych warunkach. Owulacja może być nieregularna z powodu okoliczności życiowych, emocji lub innych czynników. Nie można zakładać, że owulacja zawsze wystąpi w tym samym czasie po menstruacji. Dlatego należy przeprowadzać test w każdym cyklu menstruacyjnym.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU TESTOWEGO

- Torebka zawierająca pasek i substancję pochłaniającą wilgoć.
- Substancja pochłaniająca wilgoć jest umieszczona w torebce wyłącznie na czas przechowywania i nie jest wykorzystywana w procedurze testowej.
- Ulotka z instrukcją użytkowania.

CO JESZCZE JEST POTRZEBNE?

- Czysty, plastikowy lub szklany pojemnik na próbkę moczu.
- Zegarek

POBIERANIE PRÓBK I PRZYGOTOWANIE

KIEDY POBRAĆ MOCZ DO TESTU?

Do testu owulacyjnego nadaje się jakakolwiek próbka moczu

JAK POBRAĆ MOCZ?


Próbkę moczu można pobrać do dowolnego czystego, plastikowego lub szklanego pojemnika.

KIEDY ZACZAĆ BADANIA?

Długość cyklu menstruacyjnego to okres zaczynający się od pierwszego dnia krwawienia miesięcznego i trwający do dnia poprzedzającego kolejne krwawienie. Przed rozpoczęciem badania należy określić długość cyklu menstruacyjnego. Poniższy schemat pomoże określić, kiedy powinna Pani rozpocząć badanie. Jeśli Pani cykl jest krótszy niż 21 dni lub dłuższy niż 38 dni, proszę skontaktować się z lekarzem. Jeśli nie zna Pani długości swojego cyklu, proszę zacząć badanie 11 dnia po pierwszym dniu okresu, ponieważ średnia długość cyklu wynosi 28 dni. Proszę wykonywać 1 test każdego dnia przez 5 dni lub do wykrycia wyrzutu LH.

Schemat cyklu

Długość cyklu	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Dzień cyklu, w którym należy rozpocząć badanie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

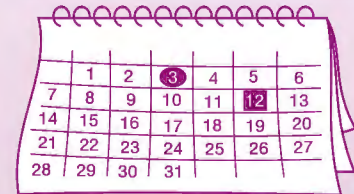


Przykład: Jeśli Pani cykl zwykle wynosi 26 dni, schemat cyklu wskazuje, że należy rozpocząć badanie w dniu 10. Poniższy kalendarz pokazuje, jak określić dzień 10.

- 3+ = pierwszy dzień krwawienia menstruacyjnego
- 12# = dzień, w którym należy rozpocząć badanie (dzień 10)

JAK WYKONAĆ TEST?

- Pasek testowy i próbka moczu muszą mieć temperaturę pokojową przed wykonaniem testu.
- Wyjąć pasek testowy z zamkniętej torebki.
- Zanurzyć pasek w moczu tak, aby strzałka skierowana była w stronę moczu. Wyjąć pasek po 3 sekundach i położyć na płaskiej, czystej, nieabsorbującej powierzchni (takiej jak brzeg pojemnika na moczu).
WAŻNE: Nie dopuścić, aby poziom moczu przekroczył poziom MAX (linia zaznaczenia). W przeciwnym razie test nie zadziała poprawnie.
- Odczytać wynik w ciągu 5 minut. Nie odczytywać wyników po upływie 5 minut.

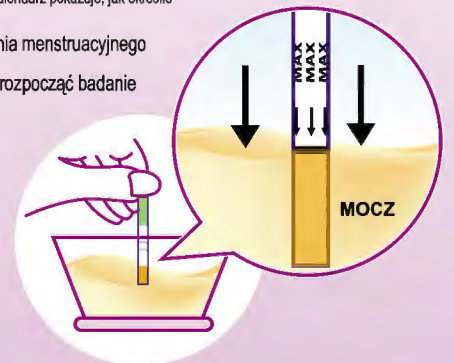

JAK ODCZITAĆ WYNIKI?



Wynik pozytywny

- Obszar kontrolny
- Obszar testowy

Brak wyrzutu LH:

Pojawia się tylko jeden kolorowy prążek w obszarze kontrolnym lub pojawia się prążek testowy, ale jest jaśniejszy niż prążek kontrolny. To znaczy, że nie ma wyrzutu LH.



Wynik negatywny

- Obszar kontrolny
- Obszar testowy

Wyrzut LH:

Jeśli widoczne są dwa kolorowe prążki, a prążek testowy jest taki sam lub ciemniejszy niż prążek kontrolny, owulacja prawdopodobnie nastąpi w ciągu kolejnych 24-48 godzin. Jeśli stara się Pani zajść w ciążę, najlepiej jest odbyć stosunek po upływie 24 godzin, ale przed upływem 48 godzin.



Wynik nieważny

- Obszar kontrolny
- Obszar testowy

Wynik nieważny:

Brak jakiegokolwiek widocznego prążka lub prążek widoczny w obszarze testowym, ale nie w obszarze kontrolnym. Należy ponownie przeprowadzić test, wykorzystując nowy zestaw testowy. Jeśli test nadal jest nieważny, proszę skontaktować się z dystrybutorem lub sklepem, gdzie kupiła Pani produkt, i podać numer serii.

OGRANICZENIA

- Test działa wyłącznie w przypadku, gdy procedura testowa jest ściśle przestrzegana.
- Tego testu nie można stosować jako metody antykoncepcyjnej.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli występują u Pani nieregularne lub bardzo długie cykle menstruacyjne.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

- Linie kontrolne na dwóch testach bardzo się różnią. Czy należy się tym martwić?

Nie. Różnice w kolorze prążków kontrolnych nie wpłyną na wynik testu. Należy porównywać tylko kolor prążka testowego z kolorem prążka kontrolnego na tym samym teście w dniu wykonania testu.

- Czy wyniki testu można interpretować później niż po upływie 5 minut?

Nie. Wyniki testu należy odczytać w ciągu 5 minut. Choć wynik pozytywny nie powinien zmienić się przez kilka dni, wynik negatywny może zmienić się w wynik fałszywie pozytywny w ciągu kilku minut po upływie okresu testowego, co nie byłoby poprawnym odczytem. Zawsze najlepiej jest odczytywać wynik w ciągu 5-minutowego okresu testowego, a następnie należy wyrzucić test, aby uniknąć pyomyki.

- Jak długo należy kontynuować wykonywanie testu?

Co najmniej przez 5 dni lub do chwili wykrycia wyrzutu LH.

- W okresie testowym w obszarze wyniku pojawił się różowy kolor tła i pionowe paski. Czy należy się tym martwić?

Nie. Każda próbka moczu może mieć inny skład chemiczny. Zmienna może być także wilgotność w pomieszczeniu, gdzie wykonywany jest test. Takie różnice w warunkach fizycznych mogą powodować pojawianie się pionowych paszków i / lub różowy kolor tła, ale to nie wpłynęło na wynik testu. Jeśli prążek kontrolny pojawia się w ciągu 5 minut, test działa poprawnie.

- Czy alkohol i powszechnie stosowane leki wpływają na wynik testu?

Nie, ale należy skonsultować się z lekarzem, jeśli przyjmuje Pani jakieś leki.

- Gdy uzyskam wynik pozytywny, kiedy najlepiej jest odbyć stosunek?

Owulacja prawdopodobnie wystąpi w ciągu 24-48 godzin. To jest Pani najbardziej płodny okres. W tym czasie zalecane jest odbycie stosunku.

- Obecnie stosuję metodę wyznaczania podstawowej temperatury ciała (BBT, ang. basic body temperature). Czy test owulacyjny zastępuje tę metodę?

Wzrost podstawowej temperatury ciała wskazuje przede wszystkim, że owulacja już wystąpiła. Test owulacyjny wskazuje, że owulacja wystąpi.

- Uzyskałam pozytywny wynik i odbyłam stosunek w trakcie dni płodnych. Nie zasiam w ciążę. Co mam zrobić?

Wiele czynników może wpływać na Pani zdolność do zajścia w ciążę. Często konieczne będzie stosowanie zestawu przez 3-4 miesiące. Pani i Pani partner powinniście skontaktować się z lekarzem, jeśli nie uda się uzyskać ciąży po 3-4 miesiącach.

- Czy ilość wypitych przez mnie płynów wpłynie na wynik?

Radzimy, aby ograniczyła Pani przyjmowanie płynów na około dwie godziny przed pobraniem moczu do badania. Duża ilość płynów przyjętych przed badaniem rozcieńczy hormon zawarty w moczu.

ZNACZENIE SYMBOLI NA OPAKOWANIU

	Pozor! Czytajcie uważnie naviad k použití! Pozor! Czytajcie pozorne naviad na pouzitie! Uwaga! Przczytaj instrykcje		Pocet testu v baleni! Pocet testov v baleni Liczbza testov		skladujte na suchem a chladnem miste, chraňte pred sluncem skladujte na suchom a chladnom miste, chraňte pred slnkom przechowywac w chlodnym, suchym miejscu, chronić od slonca
	Pouze k použití in vitro Iba na pouzitie in vitro Diagnostyki in vitro		Spořtebujte do Spotřebujte do Stosovať przed		Nepouzivejte opakovane, Nepouzivajte opakovane Uzyvac tylko raz
	Składujcie medzi 4 °C a 30 °C Składujcie medzi 4 °C a 30 °C Przczykwywac w temperaturze od 4 do 30 °C		Číslo šarže Číslo šarže Nummer Lot		Evropský zástupce, Európsky zástupca Przedstawiciel Europejskiego
			Výrobce. Výrobca. Fabrykant.		

Core Technology Co., Ltd., R. 100, Bldg. C, No.29
Life Park Rd., Changping Distr., Beijing, China

Zástupce v ES Wellkang Ltd. t/a Wellkang Tech Consult
Suite B, 29 Harley Str., London W1G 9QR England, UK

SK Ovulačný test moču Life Light

Kat. č.: LF-LS (2,5 mm–6,0 mm)

Jednostupňový ovulačný test moču Life Light je kvalitatívny test používaný na predpoveď, kedy nastáva zvýšenie LH a teda kedy pravdepodobne budete mať ovuláciu. Iba na použitie pri testovaní testu in vitro u samej seba. Iba na vonkajšie použitie.

AKO TEST FUNGUJE?

Hladina LH (luteinizujúci hormón), ktorý je za normálnych okolností v moči žien prítomný, sa uprostred menštruačného cyklu výrazne zvýši. Zvýšenie LH spusti ovuláciu, čo je čas, kedy sa obvykle u plodných žien pravidelne uvoľňuje vajíčko. Odborníci z WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) tvrdia, že testovanie LH je spoľahlivý spôsob na zistenie ovulácie. Ovulácia nastane 24-48 hodín po pozitívnom výsledku testu. Pri ponorení prúžka do vzorky moču prechádza vzorka vďaka kapilárnemu pôsobeniu membránou. Keď LH vo vzorke dosiahne oblasť testovacej zóny membrány, vytvorí farebnú čiarku. Neprítomnosť tejto farebnej čiarky znamená negatívny výsledok. Pokiaľ bol test vykonaný správne, objavia sa v oblasti kontrolnej zóny farebná čiarka, ktorá slúži ako kontrola správneho postupu. Testovací prúžok zistí ovuláciu s vysokým stupňom istoty. Je to cenný nástroj, ktorý pomáha ošarchaviť, pretože určuje obdobie, kedy sa bunky vajíčka a spermie stretnú za najlepších podmienok. Ovulácia môže byť nepravidelná z dôvodov rôznych okolností, emócií a ďalších faktorov v živote. Nemôžete predpokladať, že ovulácia nastane vždy v rovnaký čas po menštruácii. Preto musíte test v každom menštruačnom cykle vykonávať znova. Uchopenie Kontrolná zóna Testovacia zóna Čiara maximálnej úrovne Konec vzorky

OBSAH TESTOVACEJ SÚPRAVY

- Dve vrecká obsahujúce prúžok a prostriedok na vysušenie. Prostriedok na vysušenie slúži iba na skladovacie účely a pri testovaní sa nepoužíva.
- Letáčik s pokynmi na použitie.

ČO EŠTE POTREBUJETE?

- Čistú suchú plastovú alebo sklenenú nádobku na odber moču.
- Zariadenie na meranie času (hodinky alebo hodiny).

ODBER VZORKY A PRÍPRAVA

KEDY ODOBRAŤ VZORKU MOČU NA TESTOVANIE?

Na vykonanie tehotenského testu je vhodná akákoľvek vzorka moču.

AKO ODOBRAŤ MOČ?


Vzorky moču možno odberať do akejkoľvek čistej suchej plastovej alebo sklenej nádobky.

KEDY ZAČAŤ TESTOVAŤ

Dĺžka menštruačného cyklu je obdobie od prvého dňa menštruačného krvácania do dňa pred začiatkom nasledujúceho krvácania. Pred testovaním si zisťte dĺžku menštruačného cyklu. V nižšie uvedenej tabuľke si zisťte, kedy máte začať testovať. Ak je váš menštruačný cyklus kratší ako 21 dní alebo dlhší ako 38 dní, poraďte sa so svojím lekárom. Ak nepoznáte dĺžku svojho menštruačného cyklu, môžete začať testovať 11 dní po svojej prvej menštruácii, pretože priemerná dĺžka menštruačného cyklu je 28 dní. Vykonávajte každý deň jeden test počas 5 dní alebo kým nezistíte zvýšenie hladiny LH.

Príklad kalendára

Dĺžka cyklu	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Deň cyklu	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

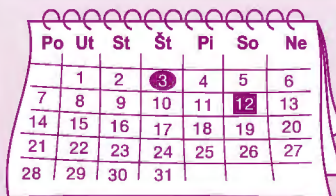


Príklad: Pokiaľ váš normálny menštruačný cyklus trvá 26 dní, uvádza tabuľka, že testovanie sa má začať 10. deň. Nasledujúci kalendár uvádza, ako určiť 10. deň.

● 3 + = prvý deň menštruačného krvácania

■ 12# = deň, kedy začať testovať (10. deň)

AKO TESTOVAŤ?

- Testovací prúžok aj moč musia mať pred testovaním izbovú teplotu (15–30 °C).
- Vyberte z neporušeného obalu testovací prúžok.
- Ponorte prúžok do moču špičkou smerom k moču. Po 3 sekundách prúžok vyberte a položte ho vodorovne na čistý suchý neprievý povrch (napríklad na hrlo nádobky s močom).
DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby hladina moču nepresiahla úroveň MAX (rysa značky), inak test nebude fungovať správne.
- O 5 minút odčítajte výsledky. Neodčítajte výsledky po viac než 5 minútach.

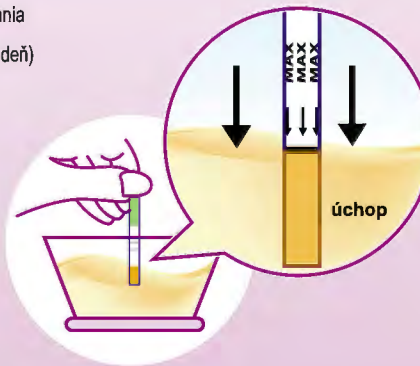

OBMEDZENIA

- Test funguje iba vtedy, keď je presne dodržaný testovací postup.
- Tento test sa nesmie používať ako antikoncepčná metóda.
- V prípade nepravidelného alebo neobvykle dlhého menštruačného cyklu sa poraďte so svojím lekárom.

OTÁZKY A ODPOVEDE

- Kontrolné čiarky sa pri dvoch testoch veľmi líšia. Je to dôvod na obavy?

Nie. Odchýlky vo farbe kontrolného prúžka neovplyvnia výsledok testu. Slúžia iba na porovnanie farby testovacej čiarky s farbou kontrolnej čiarky toho istého prípravku v deň vykonávania testu.

- Možno výsledky testu interpretovať po viac než piatich minútach?

Nie. Výsledky testu sa musia odčítať o 5 minút. Hoci sa pozitívny výsledok nezmení niekoľko dní, môže sa negatívny výsledok počas minút, ktoré nasledujú po skončení testovania zmeniť na zdanlivo pozitívny výsledok, čo by bol nesprávny údaj. Vždy je najlepšie odčítať výsledky počas päťminútového testovania a potom test zlikvidovať, aby nedošlo k nejasnostiam.

- Ako dlho mám pokračovať v testovaní?

Najmenej 5 dní alebo kým nezistíte zvýšenie hladiny LH.

- V oblasti výsledku sa počas testovania doby objavila na pozadí ružová farba a zvislé pruhy. Je to dôvod na obavy?

Nie. Každá vzorka moču sa svojím chemickým zložením líši, rovnako ako vlhkosť vzduchu v testovacej miestnosti (izbe). Tieto odchýlky fyzických podmienok môžu byť príčinou zvislých pruhov, prípadne ružovej farby pozadia, ale neovplyvnia výsledky testu. Pokiaľ sa počas piatich minút objaví kontrolná čiarka, funguje test správne.

- Ovplyvní alkohol alebo bežné lieky výsledok testu?

Nie, ale pokiaľ užívate nejaké lieky, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom.

- Keď zistím pozitívny výsledok, kedy je najvhodnejší čas na pohlavný styk?

Ovulácia pravdepodobne nastane o 24-48 hodín. To je vaše najplodnejšie obdobie. Odporúča sa mať sexuálny styk v tomto časovom rozmedzí.

- Používam teraz metódu bazálnej telesnej teploty (BBT). Nahradí tento test BBT?

Zvýšenie bazálnej telesnej teploty ploty primárne ukazuje, že ovulácia už nastala. Tento test ukazuje, že ovulácia v najbližšom čase nastane.

- Vyšiel mi pozitívny výsledok a počas týchto plodných dní som mala pohlavný styk. Neotehotnela som. Čo mám robiť?

Vašu schopnosť otehotnieť ovplyvňuje veľa faktorov. Často môže byť nutné používať testovaciu súpravu 3-4 mesiace. Pokiaľ neotehotniete po 3-4 mesiacoch, mali by ste sa vy aj váš partner poradiť s lekárom.

- Bude výsledok ovplyvnený množstvom tekutín, ktoré vypijem?

Odporúčame, aby ste asi na dve hodiny pred odberom moču obmedzili príjem tekutín, pretože vysoký príjem tekutín pred testovaním nariadi hormón v moči.

VÝZNAM SYMBOLOV NA OBALE

	Pozor! Čítajte pečlivé naviad k použití! Pozor! Čítajte pozorne naviad na pouzitie! Uwaga! Przczytaj instrykcje		Pocet testu v baleni! Pocet testov v baleni! Liczbza testov		skladujte na suchem a chladnem miste, chraňte pred sluncem skladujte na suchom a chladnom miste, chraňte pred slnkom przechowywac w chlodnym, suchym miejscu, chronić od slonca
	Pouze k použití in vitro Iba na pouzitie in vitro Diagnostyki in vitro		Spořtebujte do Spotřebujte do Stosovať przed		Nepouzivejte opakovane, Nepouzivajte opakovane Uzyvac tylko raz
	Składujcie medzi 4 °C a 30 °C Składujcie medzi 4 °C a 30 °C Przczykwywac w temperaturze od 4 do 30 °C		Číslo šarže Číslo šarže Nummer Lot		Evropský zástupce, Európsky zástupca Przedstawiciel Europejskiego
			Výrobce. Výrobca. Fabrykant.		

Core Technology Co., Ltd., R. 100, Bldg. C, No.29
Life Park Rd., Changping Distr., Beijing, China

Zástupce v ES Wellkang Ltd. t/a Wellkang Tech Consult
Suite B, 29 Harley Str., London W1G 9QR England, UK



Vertrieb-Distribution-Distribuzione: Cedem AG
CH-3001 Bern Switzerland, www.cedem.biz

Vertrieb-Distribution-Distribuzione: Cedem AG
CH-3001 Bern Switzerland, www.cedem.biz